

## Priame rekonštrukcie bez kompromisov



Vyberte si Vašu preferovanú techniku. Leptajte 10 - 15 s, opláchnite a osušte



Aplikujte G-Premio BOND a čakajte 10s




Sušte 5s pri MAX tlaku vzduchu



Vytvrdíte svetlom - 10s

G-Premio BOND preukazuje **najvyššie hodnoty pevnosti väzby na sklovinu a dentín pri samoleptaní** spomedzi produktov testovaných po termocyklovaní.

**Celková pevnosť väzby (MPa) na sklovinu a dentín pri samoleptaní, po termocyklovaní (20.000 cyklov)**

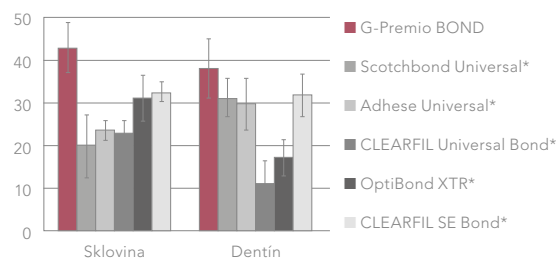

Zdroj: GCC R&D údaje, Japonsko, 2015  
\* Nie sú obchodnými značkami GC

## Opravy náhrad bez kompromisov



Vďaka MDTP monoméru vykazuje G-Premio BOND **vynikajúcu adhéziu na všetky povrchy, vrátane ušľachtilých kovov**, a to aj po tepelnom namáhaní. Väzba ostatných produktov na vzácne kovy je neúčinná.

Použitím samostatného primeru (napr. **G-Multi PRIMER**) spoločne s G-Premio BOND pri opravách umožňuje získať **trvalú väzbu na všetky druhy keramiky**.


Zdrsníte povrch, opláchnite a vysušte



Ak je keramický povrch, aplikujte **G-Multi PRIMER** a osušte



**Celková pevnosť väzby (MPa) nepriamych substrátov po termocyklovaní (5.000 cyklov)**

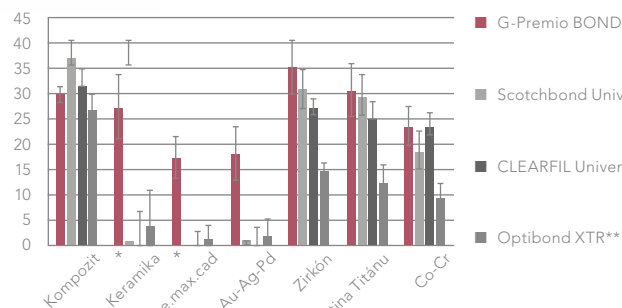

Zdroj: GCC R&D údaje, Japonsko, 2015

\* Použitý v kombinácii s Ceramic Primer II

\*\* Nie sú obchodnými značkami GC

Sušte počas 5s pri MAX tlaku vzduchu



Vytvrdzujte svetlom počas 10s



## G-Premio BOND od GC


Dovoľte si ísť na..



Žiadne zlyhanie väzby



Žiadne diskolorácie

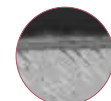

Žiadnu pooperačnú senzitivitu



Žiadne chyby



Žiaden stres



Žiadne plytvanie materiálom



Objednávacie číslo	Popis
012689	G-Premio BOND 5 ml kit EEP
012695	G-Premio BOND 5 ml náhradná náplň EEP
012690	G-Premio BOND 3-fľaštičkové balenie EEP
009035	G-Premio BOND 50 ks Unit Dose EEP

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.02.14  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GCEEO Slovakia  
Raková 1441  
SK - 023 51 Raková / Čadca  
Tel. +421.911.570.999  
Fax. +421.414.000.264  
info.slovakia@gc.dental  
www.eeo.gceurope.com

**GC**

ZOLF SK 8 77 12/18



G-Premio BOND od GC

Jednozložkové svetlom tuhnúce univerzálne adhezívum

Neverte na žiadne kompromisy



**GC**

# G-Premio BOND od GC

## Jednozložkové svetlom tuhúce univerzálne adhezívum

Nie je vždy ľahké vybrať na konkrétnu indikáciu ten správny bonding a zároveň pracovať presne podľa jednotlivých krokov postupu. Preto firma GC vyvinula **G-Premio BOND** - v ktorom, v jednej fľaštičke prináša **univerzálny bonding kompatibilný so všetkými technikami leptania** a ktorý je možné použiť nielen na priame bondovanie, ale aj na opravy náhrad a liečbu hypersenzitivity.

Okrem toho chce GC ponúknuť jednoduché použitie a univerzálnosť, bez toho aby bola ovplyvnená kvalita bondu. G-Premio BOND prináša **výhody univerzálnosti a špičkové prevedenie v každej situácii.**

Pretože neveríme na žiadne kompromisy.

## Prečo univerzálny?

### Univerzálny pre rôzne techniky leptania

Výber je na Vás!



Self-etch  
(samoleptanie)



Selective etch  
(selektívne naleptanie)



Total-etch  
(totálne naleptanie)

### Univerzálny v indikáciách

Všestranné použitie!



Priame výplne\*



Opravy náhrad\*



Ošetrenie hypersenzitivity\*\*

### Univerzálny v prevedení

Optimálne fyzikálne vlastnosti na rôzne podklady!

4-MET

pre spoľahlivú adhéziu na **dentín** a sklovinu

MDP

pre vynikajúcu adhéziu na **sklovinu** a dentín, zirkón, alumínium a neušľachtilé zliatiny

MDTP

pre väzbu na **vzáčne kovy\*\*\***

Vďaka kombinácii troch funkčných monomérov:

# Neverte na žiadne kompromisy

## Žiadny kompromis v prevedení

### Usilujte sa o žiadny debonding!

G-Premio BOND garantuje **dokonalú pevnosť väzby na sklovinu a dentín bez ohľadu na techniku leptania**, čím zabezpečuje **optimálne prevedenie a trvácnosť**. Jeho **unikátne zloženie postavené na troch funkčných monoméroch** (4-MET, MDP a MDTP) ponúka stabilný bonding nie len na samotnú **štruktúru zuba**, ale aj na **kompozity, kovy (vrátane vzácných kovov), zirkón a alumínium**. V kombinácii s keramickým primerom ako je **G-Multi PRIMER** vytvorí **trvácnu adhéziu k akémukoľvek typu keramiky**, dokonca aj po termocyklovaní. Pretože veríme, že samostatné silanizovanie prinesie najlepšie dlhodobé výsledky.

Urobte krok k úspechu!

### Cieľom sú žiadne diskolorácie!

Vďaka **optimálnej zmáčavosti a penetrácii**, ako aj **vďaka účinnému procesu schnutia** (5 sekúnd pri MAXIMÁLNOM tlaku vzduchu) dosahuje G-Premio BOND **výnimočne tenkú hrúbku filmu 3 µm**. Hoci ide o tekutý bondovací materiál, **obsahuje vysoké množstvo plniva a fotoiniciátorov**, ktoré pomáhajú **dosiahnuť silnú vrstvu bondu**. Tieto **charakteristiky spolu s nulovým obsahom HEMA** garantujú ochranu vrstvy bondu v čase a zabraňujú hydrolyze, ktorá vedie k diskoloráciám.

Vyberte si trvácne estetické výsledky!

### Usilujte o nulovú pooperačnú senzitivitu!

S G-Premio BOND si **neusíte robiť starosti** o otvorené tubuly, ktoré môžu viesť k pooperačnej senzitivite. Pri použití samoleptania a selektívnych techník leptania sa tubuly **otvoria iba nepatrne**. Pri technike totálneho leptania budú tubuly **úplne infiltrované** vďaka výnimočnej zmáčavosti a penetračnej schopnosti bondu.

Eliminujte diskomfort pacienta!

### Neurobíte žiadne chyby!

S G-Premio BOND sú **chyby pri manipulácii** v rámci rutinných rekonštrukcií **prakticky vylúčené**. Tým, že G-Premio BOND kombinuje ľahký postup s **nízkou náročnosťou na techniku**, poskytuje počas výkonu absolútny pokoj myslieť:

- **Pevnosť väzby je dostatočná, aj keď nie je úplne dodržaná doba čakania**
- **Fáza vyfúkania sa nedá opomenúť**: 5 sekúnd s MAX. tlakom vzduchu
- **Tuhnutie svetlom je veľmi účinné** vďaka vysokému obsahu fotoiniciátorov
- **Vizuálna kontrola aplikovaného materiálu** sa robí ľahko, keďže pred spolymerizovaním má žltkastú farbu

Užite si zhovievavosť postupu!

### Pracujte bez žiadnych problémov!

G-Premio BOND so svojimi **7 minútami** pracovného času dovoľuje **prácu bez stresu**. Taktiež Vám prináša všestranné riešenia iba v jednej fľaštičke: priamy bonding, opravy náhrad a liečba hypersenzitivity.


Aplikácia je jednoduchá vďaka jeho **optimálnej viskozite a zmáčavosti**: mohli by ste povedať, že G-Premio BOND "sa správa ako voda".

Zabudnite na zdĺhavé rutiny!

### Usilujte o prácu bez žiadneho plytvania!

S G-Premio BOND **šetrite Váš drahocenný čas** vďaka rýchlemu postupu: 25 sekúnd samoleptanie, 50 sekúnd selektívne alebo totálne leptanie. Bude to výhodné najmä v situáciách, kde izolácia nie je optimálna, alebo u pediatrických prípadoch. G-Premio BOND Vám tiež pomôže **minimalizovať plytvanie s materiálom** vďaka unikátnemu silikónovému uzáveru fľaštičky, ktorý optimalizuje dávkovanie materiálu pomocou tenkej koncovky, ktorá nadáva veľmi malé kvapky - **až do 300 na jednu fľaštičku**. Stabilný do poslednej kvapky...

Prestanete s plytvaním časom a materiálom!

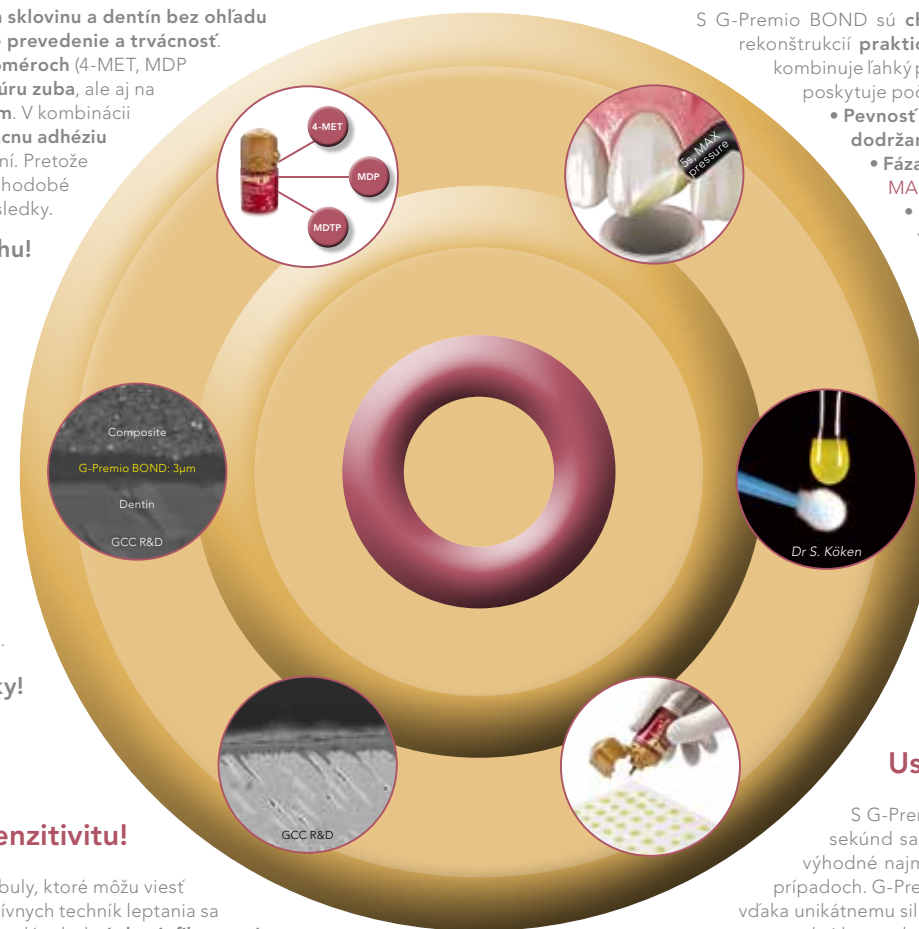

Žltkastý pred vytvrdením pre jednoduchú aplikáciu



Úplne neviditeľný po svetelnom vytvrdnutí pre najlepší estetický výsledok

Obrázky s láskavým dovolením Dr. S. Kókény, Turecko

\* Obrázky s láskavým dovolením Dr. S. Koide, Japonsko  
\*\* Obrázok s láskavým dovolením Dr. E. Sauji, Japonsko  
\*\*\* MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate