

Ketac™ Universal Aplicap™

Skloionomérený výplňový materiál



Dokončíte rýchlejšie a pevnejšie

Výhody

- Bez potreby kondicionéru a prekryvania
- Bulk fill - bez potreby vrstvenia
- Umožňuje rýchle, jedнокrokové, odolné riešenie rekonštrukcií
- Širšie pole indikácií v porovnaní s inými materiálmi
- Nízka lepivosť umožňuje jednoduché umiestnenie
- Sústavne uvoľňovaný fluorid počas 24 mesiacov
- Samoadhezívny
- Samotuhnúci
- Dostupný v 6 odtieňoch
- Rádiokontrastný

Teraz ich dostanete z kresla ešte rýchlejšie!

Ošetrovanie detských, adolescentných a geriatrických pacientov, ktorí nedokážu vydržať v klude dlho, je pre lekára ako preteky z časom. Skloionomérený výplňový materiál Ketac™ Universal Aplicap™ redukuje čas strávený v kresle vďaka jednoduchému jedнокrokovému riešeniu ... takže skončíte rýchlejšie.


Menej krokov = jednoduchá a rýchlejšia procedúra

| Kroky potrebné po príprave kavity* | Skloionomérený výplňový materiál Ketac™ Universal Aplicap™ len 4 kroky | GC Fuji IX GP 13 krokov | EQUIA FIL 13 krokov |
|-------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|
| kondicionér | | ● | ● |
| opláchnutie | | ● | ● |
| sušenie vzduchom | | ● | ● |
| pretrepanie kapsle | | ● | ● |
| aktivácia kapsle | ● | ● | ● |
| umiestnenie kapsle do prístroja | | ● | ● |
| mixovanie kapsle (miešací prístroj) | ● | ● | ● |
| umiestnenie do kavity | ● | ● | ● |
| prekryvanie | | ● | ● |
| vytvrdenie svetlom /vzduchom | | ● | ● |
| dokončovacia fáza | ● | ● | ● |
| prekryvanie | | ● | ● |
| vytvrdenie svetlom /vzduchom | | ● | ● |

*Kroky podľa návodu na použitie od výrobcu.

Dostatočne silný na použitie pri dlhodobých indikáciách

Výplňový materiál Ketac Universal šetrí čas, vďaka eliminácii kroku aditívneho prekryvania - navyše poskytuje vyššiu kompresívnu silu a tvrdosť povrchu v porovnaní s inými skloionomérmí, ktoré tento krok vyžadujú.

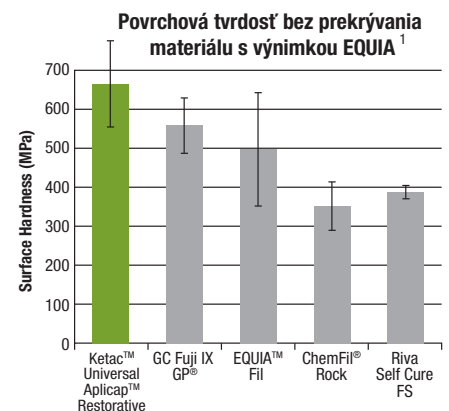

1. Zdroj: Ketac™ Universal Glass Ionomer Restorative Technical Data Sheet

3M ESPE

Ketac™ Universal Aplicap™

Skloionomérený výplňový materiál

Nízka lepiivosť umožňuje jednoduché umiestnenie do kavity.


Jedna z výhod skloionoméreného výplňového materiálu Ketac™ Universal Aplicap, vďaka ktorej vyniká nad inými materiálmi, je fakt, že sa nelepí na dentálne nástroje počas vyplňovania kavity - umiestnenie a tvarovanie je naozaj jednoduché.

Dôkazom je laboratórny test. Kovový piest bol ponorený do hmoty namiešanej z každého výplňového materiálu a okamžite vytiahnutý. Na fotkách z testu jednoznačne vidieť, že skloionomérený výplňový materiál Ketac™ Universal

Aplicap™ sa nelepí na kovovú guľôčku, zatiaľ čo na ostatných testovaných skloionomérených výplňových materiáloch je možno pozorovať lepiivosť po tom, čo bol nástroj vytiahnutý.



Piesty boli ponorené do namiešanej hmoty a okamžite vytiahnuté.

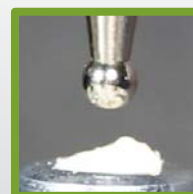

Skloionomérený výplňový materiál Ketac™ Universal Aplicap



GC Fuji IX GP® Caps



EQUIA™ Fil Caps



Riva Self Cure Caps

Indikácie

- podložky pre jedno a viacplošné kompozitné výplne
- doformovanie pahýľov pred nanosením korunky
- výplne mliečnych zubov
- rekonštrukčné práce triedy I a II, ktoré nesú žuvaciu záťaž
- výplne zubných krčkov pre dodatočnú estetiku
- jedno - a viacplošné prechodné výplne
- pečatenie fisúr



Pôvodný stav



Príprava kavity



Vyplnenie kavity



Konečný stav

Pokrokové mechanické vlastnosti Ketac Universal Aplicap umožňujú rozšírenie indikácií na aplikáciu rekonštrukcií v triede I a II.

Fotky uverejnené s povolením Dr. Jacqueline Esch.

1. Zdroj: Ketac™ Universal Glass Ionomer Restorative Technical Data Sheet
2. Viac informácií nájdete v návode na použitie.

Informácie pre objednanie



| Objednávaci kód | Product Information |
|--|--|
| Doplňujúce balenia Ketac™ Universal Aplicap | |
| 61085 | 50 kapslí, Odtiene: biely, A2, A3 |
| 61086 | 50 kapslí, Odtiene: biely (W) |
| 61087 | 50 kapslí, Odtieň A1 |
| 61088 | 50 kapslí, Odtieň A2 |
| 61089 | 50 kapslí, Odtieň A3 |
| 61095 | 50 kapslí, Odtieň A3.5 |
| 61096 | 50 kapslí, Odtieň A4 |
| 61097 | Ketac™ Universal Aplicap - Giant Pack A3 Obsahuje: 300 Aplicap capsules. |
| 73040 | Aplicap™ Activator |
| 73050 | Aplicap™ Applier |
| 76300 | Rotomix™ Capsule Mixing Unit |

www.3MESPE.sk

3M ESPE

Dental Products

3M Slovensko s.r.o.,
Vajnorská 142
821 04 Bratislava

3M Deutschland GmbH

Location Seefeld
3M ESPE • ESPE Platz
82229 Seefeld • Germany
Info3MESPE@mmm.com
www.3MESPE.com

Prosím recyklujte.
Vytlačené na Slovensku.

3M, ESPE, Aplicap, Ketac a Rotomix are sú obchodné značky 3M alebo 3M Deutschland GmbH. Používanie pod licenciou Kanady. © 3M 2015. Všetky práva vyhradené. Všetky ostatné značky nie sú značkami 3M.