


Jednoduché SNÍMANIE


Skvelé odstránenie

Vyvážená pevnosť väzby umožňuje pevnú fixáciu zámkov, krúžkov aj aparátov počas celej liečby, zároveň však zabráňuje poškodeniu skloviny pri ich snímaní. Vďaka tomu, že prirodzene vlhké prostredie úst napomáha udržiavať adhezívnu silu materiálu, po celý čas umiestnenia zostávajú zámky a krúžky bezpečne na mieste.

Pevnosť väzby zámkov

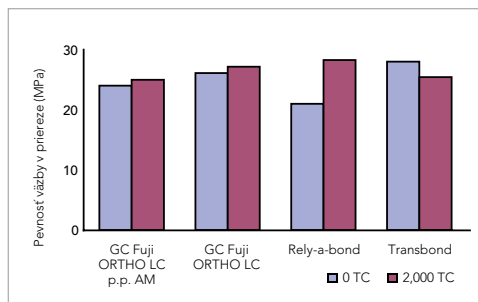

Pevnosť väzby krúžkov

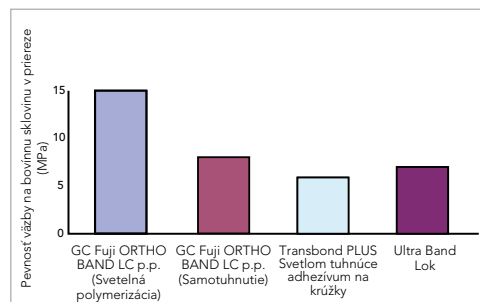

Interné údaje z Oddelenia pre výskum a vývoj spoločnosti GC, Japonsko

Skvelý výsledok

Bezprostredne po odstránení zámkov s GC Fuji ORTHO LC



Nepretržité uvoľňovanie fluoridov pomáha chrániť sklovinu

Bezprostredne po odstránení zámkov bondovaných pomocou živcového cementu



Nedostatočná fluoridová ochrana, ktorá spôsobila vzniknutie bielych škvŕn

GC Fuji ORTHO family

Samotuhnutie



Fuji ORTHO

Prášok / tekutina

Úvodné balenie: 40 g prášok, 2 x 6,8 ml tekutina
Náhradné balenie: 40 g prášok, 6,8 ml tekutina



Fuji ORTHO Band Paste Pak

Náhradné balenie: 2 x 13,3 g (7,2 ml)
Kartuša Paste Pak cartridge s miešacou podložkou

Svetelná polymerizácia



Fuji ORTHO LC

Prášok / tekutina

Úvodné balenie:
15 g prášok, 6,8 ml tekutina
Náhradné balenie:
40 g prášok, 6,8 ml tekutina
Kapsle
50 kapslí
(namiešaný objem v jednej kapsli 0,10 ml)



Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix

Náhradné balenie:
2 x 13,3 g (7,2 ml) Paste Pak cartridge
Startovacie balenie:
1 x 13,3 g (7,2 ml) kartuša Paste Pak cartridge,
20 x miešacie koncovky LC,
2 x ORTHO Gel Conditioner,
15 štetčkových koncoviek



Fuji ORTHO Band LC Paste Pak Automix

Náhradné balenie:
2 x 12,9 g (7,2 ml)
Kartuša Paste Pak cartridge
s miešacou podložkou

Príbuzné výrobky



Dávkovač
Paste Pak Dispenser



Aplikátor
Capsule Applier



GC ORTHO
Conditioner



GC ORTHO
Gel Conditioner



GC Miešacie
koncovky LC

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Czech R. & Slovakia
V Olšinách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
slovakia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Jednoduchá **FIXÁCIA** -
Jednoduché **SNÍMANIE**
S **GC** je ortodontické cementovanie
jednoduchšie.



Fuji ORTHO
od GC.

Kombinácia uvoľňovania fluoridov a jednoduchej manipulácie s optimálnou pevnosťou väzby, ktorá je v ortodoncii tak potrebnou. GC Fuji ORTHO family - skvelé riešenie pre skvelé výsledky, pokoj na duši a spokojných pacientov.

GC

GC

Jednoduchá FIXÁCIA

S živicou modifikovanými skloionomérmí GC Fuji ORTHO dosiahnete **skvelé výsledky**, pretože poskytujú **fluoridovú ochranu**, a zámky a krúžky s nimi **jednoducho fixujete** a po ukončení ortodontickej liečby ich **bez problémov odstránite**.

Skvelá fixácia

S radom Fuji ORTHO family je postup „jednoduché fixácie“ zaručený, keďže netreba naleptávať kyselinou a udržiavať suché operačné pole. Lekár tak počas ortodontickej liečby neplatí časom, ani materiálom.

Krok za krokom



Zámok s naneseným materiálom priložte na zub, povrch zuba však nepresúšajte.



Zámok 5 sekúnd vytvrdzujte v režime „tack cure“ a nadbytočný materiál odstráňte scalerom.



Napokon materiál 20 sekúnd vytvrdzujte zo všetkých strán.

Dr. A. Komori, Japonsko

Skvelá ochrana

Vzhľadom na to, že netreba naleptávať, tak zub sa počas operácie nepoškodzuje. Pre lepšiu ochranu a pevnosť väzby použite na 10 sekúnd ORTHO gel Conditioner pre jemné ošetrenie skloviny.




Povrch zuba starostlivo vyčistite a vyleštite



Naneste Fuji ORTHO Gel Conditioner

Dr. A. Komori, Japonsko

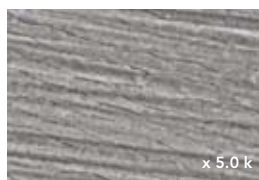


Jemné ošetrenie pomocou ORTHO Gel kondicionéru



Štruktúra skloviny po naleptaní kyselinou

Interné údaje z Oddelenia pre výskum a vývoj spoločnosti GC, Japonsko

Uvoľňovanie fluoridov

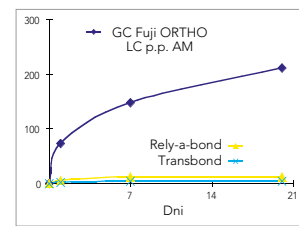

Interné údaje z Oddelenia pre výskum a vývoj spoločnosti GC, Japonsko

Vďaka dlhodobému a opakovanému uvoľňovaniu fluoridov, ktorým sa skloionoméry vyznačujú, dochádza k vytvoreniu inhibičnej zóny, ktorá pomáha chrániť sklovinu priliehajúcu k ortodontickým zámkom a krúžkom. Znižuje sa tak riziko vzniku bielych škvrín počas ortodontickej liečby.

Vlastnosti a výhody	Samotuhnutie		Svetelná polymerizácia			
	Prášok / tekutina Najúspornejšia forma balenia Flexibilne dodá potrebné množstvo	Fuji ORTHO Prášok / tekutina		Fuji ORTHO LC Prášok / tekutina		
Kapsle Rýchla a jednoduchá priama aplikácia Dodajú presne toľko materiálu, koľko treba, a to v správnych pomeroch			Fuji ORTHO LC Kapsle			
Pasta / Pasta Jednoduché dávkovanie s možnosťou výberu medzi miešaním pomocou Automixu alebo ručne bez vytvárania vzduchových bublín Môžete si zvoliť ľubovoľné množstvo, vždy však získate správny pomer	Fuji ORTHO Band Paste Pak		Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix			
						Fuji ORTHO Band LC Paste Pak Automix
Čas miešania	30"	15"	30"	10"	-	15"/-
Pracovný čas	2'50"	3'30"	3'15"	3'00"	5'00"	3'30"
Čas tuhnutia	3'00"	3'00"	20"	20"	20"	20"
Hrúbka filmu	23 μ	3 μ	24 μ	30 μ	18 μ	3 μ

