



*initial*<sup>™</sup>  
IQ ONE SQIN

Dofarbovací a vrstviaci  
keramický systém

**GC**

# 90% všetkých zubov sú zoradené v kľúčovom odtieni ...

Už nejaký čas je možné vyrobiť posteriórne náhrady z jedného materiálu, ako je napríklad lítium disilikát alebo zirkón, ktoré sú dostatočne estetické bez náročnej techniky nanášania vrstiev. Čoraz viac rozšírené sú monolitické náhrady.

**GC Initial IQ ONE SQIN** - dofarbovací a vrstviaci keramický systém - s ktorým je možné rovnakým spôsobom dosiahnuť esteticky príťažlivé náhrady vhodné pre frontálny úsek. Na základe GC Initial filozofie „IQ“ sa systém skladá z rôznych keramických materiálov, ktoré sú dokonalo prispôsobené na spoločné použitie a zaisťujú tak efektívnu a esteticky presvedčivú finalizáciu monolitických náhrad a náhrad s redukciou bukálneho povrchu.





*initial*<sup>™</sup>  
IQ ONE SOIN

## Initial IQ Lustre Pastes ONE

Univerzálna dofarbovacia keramická hmota pre vonkajšie použitie, ako aj na vnútornú charakterizáciu subštruktúr. Ak sa použije so SQIN, slúži tiež pre väzobné pálenie.

- ✓ konzistencia pripravená na použitie
- ✓ inherentná fluorescencia
- ✓ trojrozmerná hĺbka farieb

## Initial IQ SQIN

Dotvára finálne kontúry Vašich náhrad a ponúka živosť, textúru a prirodzený lesk.

- ✓ jednoduché nanášanie a vytvorenie textúry
- ✓ efekt samoleštenia
- ✓ trojrozmerná povrchová štruktúra

## Initial Spectrum Stains

Jemné práškové farbičky pre mimoriadne individuálne efekty.

- ✓ nekonečné farebné nuansy
- ✓ môžu sa zmiešať s Lustre Pastes ONE alebo SQIN



S **GC Initial IQ ONE SQIN** - dofarbovacím a vrstviacim keramickým systémom - môžete rýchlo a ľahko dosiahnuť vysoké estetické výsledky porovnateľné s náhradami s konvenčným postupom vrstvenia, ale s výraznou úsporou času.



## Ako to funguje? Vyberiete si ...

### Technika nanášania mikro vrstiev (monolitické náhrady s redukciou bukálneho povrchu)

Pasty GC Initial IQ Lustre Pastes ONE sa používajú pre individualizáciu konštrukcie a tiež ako väzobná vrstva, ktorá zabezpečuje dokonalé spojenie s keramikou SQIN. Pri technike nanášania mikro vrstiev sa SQIN ľahko nanáša v hrúbke vrstvy 0,1 - 0,6 mm na povrch zafarbený a fixovaný pomocou Lustre Pastes ONE. Vďaka vylepšenej zmesi na báze feldsparu (živca) sa vytvorí realistický 3D efekt, ktorý prináša sýtosť farieb a realistickú translucenciu.

Po zmiešaní s tekutinou Form and Texture sa prášky SQIN premenia na vysoko kompaktnú a hustú keramickú suspenziu. Ich jedinečné aplikačné a modelovacie vlastnosti umožnia vytvorenie individuálnej povrchovej textúry so samoleštiacimi vlastnosťami po vypálení keramickej hmoty.




... získate to, čo zafarbíte!


## Technika farbenia (monolitické náhrady)

Trojrozmerná dofarbovacia keramická hmota na báze feldsparu (živca) GC Initial IQ Lustre Pastes ONE, ktorá je k dispozícii v konzistencii pripravenej na použitie, dodá Vaším monolitickým náhradám farebnú hĺbku a prirodzenú translucenciu s veľmi prirodzeným leskom.

Pasty možno aplikovať v silnejšej vrstve, ktorá zaručuje neprekonateľnú živosť a veľmi prirodzený lesk. Vďaka svojej inherentnej fluorescencii sú pasty vyladené tak, aby zvýšili fluorescenciu Vašich monolitických náhrad, najmä keď používate Lustre Paste ONE Neutral FLUO (L-NFL).

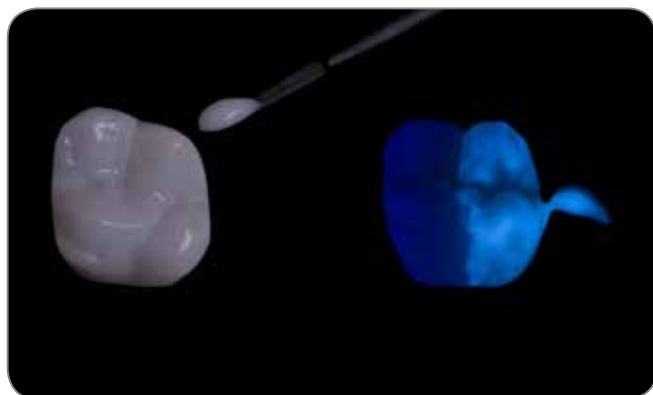

# Estetika

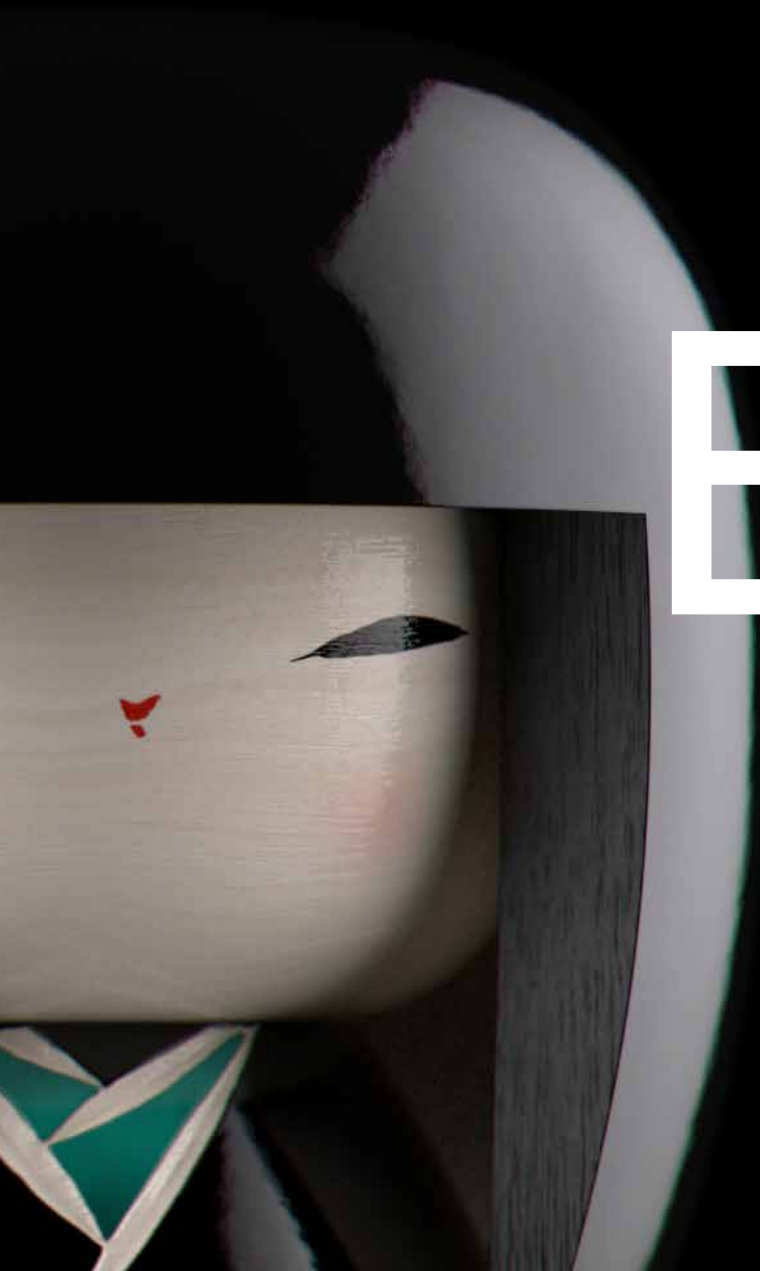



## Krása vo vnútri



Prirodzená fluorescencia



Krása zubov aj d'asien



Maximálna estetika v mikro vrstve



## Jednoduchý a časovo úsporný



V mokrej fáze vytvorte tvar a jemnú textúru.  
Po vypaľovaní nedôjde k žiadnym zmenám.



Initial IQ Lustre Pastes ONE slúžia tiež ako väzobné pálenie.



Samoleštiace vlastnosti.  
Získajte nádherný lesklý povrch po jednom vypaľovaní.

# Praktický



# Univerzálny

## Jeden systém ...



... pre všetky Vaše Zr a LDS celokeramické náhrady



... pre techniku nanášania mikro vrstiev aj techniku farbenia



... pre predné aj zadné náhrady

Sada **ONE SQIN System Set** pre jednoduché dosiahnutie vysoko estetických výsledkov porovnateľných s náhradami s konvenčným postupom vrstvenia, ale so značnou úsporou času, ktorá obsahuje výber hlavných keramických komponentov.



### GC Initial IQ ONE SQIN - SYSTEM SET (kompletná sada)

- 10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g
- 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
- 1x SPS Glaze Liquid, 25 ml
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid (riediaca tekutina), 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid (obnovovacia tekutina), 8 ml
- 5x IQ SQIN prášok Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN prášok Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN prášok Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN prášok GUM (svetlý, tmavý, neutrálny), 10 g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid (modelovacia tekutina), 25 ml
- 1x IQ LP ONE miešacia podložka
- 1x IQ LP ONE štetec 00
- 1x IQ LP ONE štetec 2
- 1x IQ LP ONE plastový kryt
- 1x IQ ONE SQIN Technický manuál
- 1x IQ LP ONE schéma odtieňov
- 1x SPS schéma odtieňov



### GC Initial IQ SQIN - SHADES SET (sada odtieňov SQIN)

- 5x IQ SQIN prášok Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN prášok Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN prášok Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN prášok GUM (svetlý, tmavý, neutrálny), 10 g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
- 1x IQ SQIN Technický manuál



### GC Initial IQ Lustre Pastes ONE - V-SHADES SET (sada V-odtieňov Lustre Pastes)

- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IO LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 10x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid (riediaca tekutina), 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid (obnovovacia tekutina), 8 ml
- 1x IQ LP ONE miešacia podložka
- 1x IQ LP ONE štetec 00
- 1x IQ LP ONE štetec 2
- 1x IQ LP ONE schéma odtieňov



## Technika ONE SQIN - pre všetky Vaše zirkónové náhrady a náhrady z lítium disilikátu

- ✓ Vytvorte tvar a detaily jemnej textúry v mokrej fáze - po vypaľovaní nedôjde k žiadnym zmenám.
- ✓ Samoleštiace vlastnosti - získajte nádherný lesklý povrch po jednom vypaľovaní.
- ✓ Optimálna úroveň fluorescencie - zaisťuje vzhľad prirodzených zubov za všetkých svetelných podmienok.
- ✓ Maximálna estetika v mikro vrstve.



Fotografie s láskavým dovolením:

ZTM Michael Brüschi (Nemecko): str. 7 (obrázok v strede a vpravo); str. 9 (obrázok v strede vpravo a dole vpravo); str. 13 (ľavá strana, obrázok v strede vľavo, hore vpravo a pravá strana, obrázok dole vpravo)  
MDT Leonardo Cavallo (Taliansko): str. 7 (obrázok vľavo); str. 9 (obrázok hore vľavo)  
MDT Patric Freudenthal (Švédsko): str. 13 (pravá strana, obrázok v strede vľavo)  
ZTM Stefan Roozen (Rakúsko): str. 6 a str. 10; str. 13 (ľavá strana, obrázok dole vpravo)

*initial*<sup>TM</sup>  
IQ ONE SQIN

#### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<https://europe.gc.dental>

#### GC EUROPE N.V.

GCEEO Slovakia  
Raková 1441  
SK - 023 51 Raková / Čadca  
Tel. +421.911.570.999  
Fax. +421.414.000.264  
info.slovakia@gc.dental  
<https://europe.gc.dental/sk-SK>

**GC**



Since 1921  
100 years of Quality in Dental