

initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

Najlepšia voľba, ktorá spĺňa najvyššie štandardy.



Najlepšia voľba, ktorá spĺňa najvyššie štandardy

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite, navrhnutý tak, aby poskytoval dokonalú rovnováhu medzi vysokou pevnosťou a výnimočnou estetikou, je ideálnou voľbou pre anteriórne aj posteriórne náhrady.



VYNIKAJÚCA ESTETIKA

Prírodný odtieň a prechod translucencie pre anteriórne a posteriórne náhrady.



VYSOKÁ PEVNOSŤ

Klasifikované ako Class V podľa normy DIN EN ISO 6872 so strednou hodnotou > 1 100 MPa.




OMNI-FUNKČNÉ

Všestranne a vhodné pre široké spektrum klinických indikácií. Rýchle alebo bežné sintrovanie.


Prírodný prechod

Úžasne prirodzené: plynulý prechod od cervikálnej ku incizálnej časti, ako v odtieni, tak aj translucenčný, čo najlepším možným spôsobom napodobňuje prirodzenú štruktúru zubov.
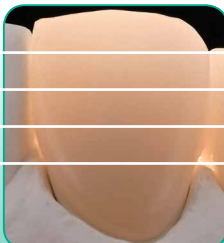
| | | |
|---|--|---------------------------|
| Translucencia >49% Pevnosť 800 MPa |  | 5Y INCIZÁLNY 20% |
| | | 4-5Y INTERLAYER 1 15% |
| | | 4-5Y INTERLAYER 2 15% |
| | | 4-5Y INTERLAYER 3 15% |
| Translucencia >45% Pevnosť 1 150 MPa | | 4Y CERVIKÁLNY 35% |

Fyzikálne vlastnosti

- Oxid zirkoničitý Typ II Class V podľa normy DIN EN ISO 6872
- Pevnosť v ohybe: typická stredná hodnota $\geq 1\ 100$ MPa
- Vysoký prechod translucencie od >45% do >49%
- Rýchle sintrovanie pre korunky a až 3-členné mostíky

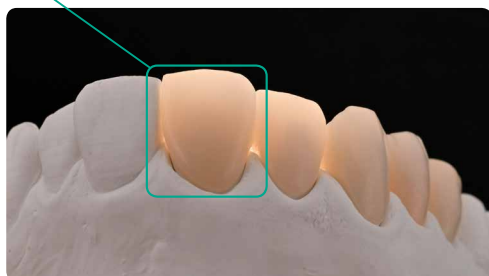


Vyrobené pre kvalitatívnu produktivitu

Vďaka intuitívnemu pracovnému postupu od GC je možné maximalizovať produktivitu bez kompromisov v oblasti kvality.

SKENUJTE & NAVRHNITE s Aadvia Lab Scan 3

Dotykom ovládaný skener s vysokou presnosťou a smart funkciami skenovania.

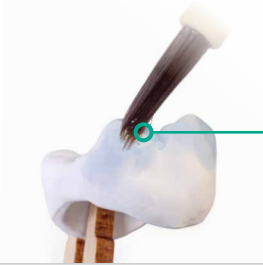

2D INNER STAIN s Zirconia Coloring Liquid

Doladte efektnými farbami pre maximálnu sofistikovanosť.

MICROLAYERING s Initial IQ ONE SQIN

3D MAĽOVANIE s Initial IQ Lustre Pastes ONE

Farba a fluorescencia - buď pre plne monolitickú prácu alebo s micro-cutbackom v kombinácii s IQ SQIN.



TVARUJTE & VYTVORTE TEXTÚRU

s Initial IQ SQIN

Vitalita, prirodzená textúra a lesk v mikrovrstve.



ALEBO

KLASICKÉ VRSTVENIE s Initial Zr-FS

Neprekonateľné optické efekty a vysoká stabilita po viacerých vypaľovaniach pri konštrukciách s klasickým cutbackom.



CEMENTUJTE s FujiCEM Evolve

Preferovaná voľba pri zirkóne, jednoduchý na použitie a ideálny pre juxtagingiválne alebo subgingiválne okraje.



initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

Najlepšia voľba, ktorá spĺňa najvyššie štandardy.

Výhody na prvý pohľad

- Vynikajúca estetika s **kombinovaným prechodom odtieňa a translucencie**.
- **Vysoká pevnosť** vo všetkých vrstvách, vďaka čomu je vhodná pre širokú škálu indikácií.
- Limituje požadované dokončenie **konštrukcie v správnom farebnom tóne**.
- **Optimálna synergia** s Initial Zirconia Coloring Liquid a konceptom IQ ONE SQIN pre najnáročnejšie individualizácie.
- Všetkých 16 V-odtieňov a 3 Bleach typy sú dostupné v diskoch s hrúbkou 14, 16, 20 & 25 mm a priemerom 98,5 mm.



Dokonalá synergia



Initial Zirconia Coloring Liquid



Initial IQ ONE SQIN



Initial Zr-FS

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
info.slovakia@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/sk-SK>