

RELINE™ II Soft & RELINE™ II Extra Soft

Zdravie a komfort pre aktívny život



Objavte všestrannú rodinu rebazovacích materiálov od GC



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft (Extra Mäkký)	GC RELINE II Soft (Mäkký)	GC RELINE P/L
Materiál	Akrylová živica	A-Silikón	A-Silikón	Akrylová živica (bez MMA)
Indikácie	<ul style="list-style-type: none"> Tlakové body Počas implantácie Mäkké podloženie Obnova tkaniva po poranení/zákroku Funkčné odtlačky 	<ul style="list-style-type: none"> Materiál na tónovanie tkanív Citlivá sliznica Tlakové body Normalizácie poškodených tkanív 	<ul style="list-style-type: none"> Implantáty Tlakové body Kostné výčnelky Znížená bolestivosť a zvýšený komfort Dlhotrvajúca rebazácia v prípade chýbajúceho podporného tkaniva 	<ul style="list-style-type: none"> Dlhodobé rebazovanie Nesediace zubné protézy bez akéhokoľvek poškodenia tkaniva Posledný krok po predbežnej úprave s podkladovými materiálmi a/alebo tkanivovými kondicionermi
Čas pôsobenia v ústach	Dni/týždne/mesiac	Dni/týždne	Týždne/mesiace	Mesiace/roky

Dostupné balenia Reline II Soft & Extra Soft

Intro Kit (Úvodné balenie)

- 010260 **GC RELINE II Soft Intro Kit** EEP:
 1x GC RELINE II v kartušiach (Mäkký)
 1x GC RELINE II Primer na živicu
 1x GC RELINE II Brúsik pre opracovanie
 1x GC RELINE II Kotúč pre dokončovanie
 1x GC RELINE II Odstraňovač živice
- 010263 **GC RELINE II Extra Soft Intro Kit** EEP:
 1x GC RELINE II v kartušiach (Extra Mäkký)
 1x GC RELINE II Primer na živicu
 1x GC RELINE II Brúsik pre opracovanie
 1x GC RELINE II Kotúč pre dokončovanie
 1x GC RELINE II Odstraňovač živice

Náhradné balenia

- 010266 GC RELINE II Soft (Mäkký), kartuša, 48 ml EEP
 010269 GC RELINE II Extra Soft (Extra Mäkký), kartuša, 48 ml EEP
 010273 GC RELINE II Primer na živicu, 10 ml
 010271 GC RELINE II Finishing Material (Modifier), 1-1 Pack, 2x 9 ml
 010275 GC RELINE II Odstraňovač živice, 5,5 ml
 010277 GC RELINE II Brúsik pre opracovanie x3
 010280 GC RELINE II Kotúč pre dokončovanie x12
 010283 GC RELINE II Jednorazové štetce x6

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Slovakia
 Raková 1441
 SK - 023 51 Raková / Čadca
 Tel. +421.911.570.999
 Fax. +421.414.000.264
 slovakia@eeo.gceurope.com
 www.eeo.gceurope.com

Zdravie a komfort pre aktívny život



RELINE™ II Soft (Mäkký) & RELINE™ II Extra Soft (Extra Mäkký) od GC

Mäkké silikónové rebazovacie materiály v kartušiach



Budte fit, fungujte, doprajte si pohodlie s úsmevom

na tvári za každých okolností

Podráždenie, extrakcie alebo umiestnenie implantátu vedie k zmenám v mäkkých a tvrdých tkanivách, **a preto je potrebné, aby sa zubné protézy prispôbili novým lokálnym podmienkam.**

Keďže starší pacienti v súčasnosti majú pevnejšie zdravie a zostávajú dlhšie aktívni, chcú sa aj naďalej usmievať, rozprávať a vychutnávať si jedlo aj napriek noseniu zubnej protézy.

Produkty **Reline II Soft (Mäkký)** a **Extra Soft (Extra Mäkký)** od GC boli navrhnuté tak, aby vytvorili mäkkú vrstvu medzi zubnou protézou a sliznicou, ktorá **podporuje hojenie, udržiava pohodlie a uchováva si funkciu počas niekoľkých týždňov až niekoľkých mesiacov.**



Obrázky sú publikované s povolením Dr. Garcia-Baeza, Španielsko

Lahko použiteľná silikónová podložka v kartušiach

Ideálna viskozita materiálu mu umožňuje **tiecť pod tlakom**, pričom sa výborne **prispôbi** všetkým anatomickým detailom.

Jeho vylepšená schopnosť vyhladenia Vám umožní dokonale dotvarovať okraje ešte jednoduchšie.

Dlhotrvalý komfort a príjemná úlava pre Vašich pacientov

S produktom Reline II sa teplota počas tuhnutia nezvýši, čo prispieva k väčšiemu pohodliu pre pacientov.

Materiál zostáva **hladký, bez zápachu** a udržiava si svoju **rozmerovú stabilitu a pružnosť** počas týždňov až mesiacov. Výsledok? **Trvalé a pohodlné riešenie** pre pacientov.

Pevné spojenie, jednoduchá práca a prispôbenie

Vylepšené zloženie **primeru pre živicu GC Reline II Primer** poskytuje dlhodobu **pevné spojenie k zubnej náhrade**. Toto pevné spojenie, však neznižuje jeho pružnosť.

Materiál môžete **doplniť v rámci troch mesiacov** od jeho prvej aplikácie, aby sa prispôbil zmenám sliznice a kosti. Nový **odstraňovač živice GC Reline II Remover for resin** umožňuje odstrániť opotrebovanú vrstvu a rýchlo ju nahradiť.



Vylepšená adaptabilita pri opracovaní pre lepšie dokončenie okrajov



Ochrana okrajov s Dokončovacím materiálom Reline II



GC RELINE II Primer na živicu




GC RELINE II Remover na živicu

Obrázky sú publikované s povolením Dr. Seifert, Chorvátsko

Od odolnosti k elasticite: vyberte si produkt, ktorý najviac vyhovuje klinickej situácii

GC RELINE™ II Extra Soft je odolný (elastický) materiál s uvádzanou tvrdosťou 32 (Shore A). Napomáha obzvlášť **normalizovať** podráždené tkanivá a **podporiť hojenie tkanív** po extrakcii alebo implantácii. Môže ostať aplikovaný na mieste niekoľko dní alebo týždňov.

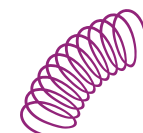

GC RELINE™ II Soft je materiál s tvrdosťou 48 (Shore A), ktorý si zachováva svoju elasticitu a v prípade anatomických problémov **si rozširuje zaťažovací tlak** podobne ako **tlmič otrasov**. Je taktiež ideálny na podkladanie **zubných protéz podporených implantátmi** po liečebnej fáze. Môže ostať aplikovaný na mieste niekoľko dní alebo týždňov.



Jednoduchá aplikácia a manipulácia počas celého zákroku



Počiatočná zubná protéza, ktorá má byť rebazovaná, po zavedení 4 implantátov.



Odlahčite oblasť, ktorá má byť rebazovaná a zdrsňte povrch.



Aplikujte GC RELINE II Primer na časť, ktorá sa má rebazovať. Jemne osušte vzduchom.



Jednoduchá aplikácia z kartuše.



Aplikujte GC RELINE II (Extra) Soft. Pracovný čas je 2 minúty.



Nasadte zubnú náhradu do úst a skontrolujte v zhryze. Udržujte na mieste 5 minút.



Odstráňte nadbytky skalpelom alebo nožnicami. Opracujte pomocou GC RELINE II Brúsik pre opracovanie.



Dokončite s GC RELINE II Kotúč pre dokončovanie.



Rebazovaná protéza.