



Neo Spectra™ ST Effects

Pro zjednodušení složitých případů
ve frontálním úseku.



Neo Spectra™ ST

Pro vaše nejčastější případy.

Jednoduše dosažitelná
vysoká estetika
s výplňovým materiálem
Neo Spectra™ ST.



Neo Spectra™ ST flow

Účinnost, všestrannost a vysoká estetika
díky tekuté konzistenci.

Desítky let vývoje nám ukázaly,
na čem stomatologům
opravdu záleží.



Jednoduchá
manipulace



Estetika




Dlouhá
životnost

SphereTEC[®]
technologie

Detail plniva SphereTEC[®] o průměru 15 mikronů

SphereTEC[®] technologie
zaručí excelentní manipulaci
s kompozity NeoSpectra ST.


Plnivo SphereTEC[®] je výsledkem procesu, ve kterém dochází k tvorbě mikroskopických přesně tvarovaných kulatých superstruktur skládajících se ze submikronových částic skla. Zásadou unikátní morfologie plniv SphereTEC[®] získáte větší pohodlí při manipulaci a lepší estetický výsledek.

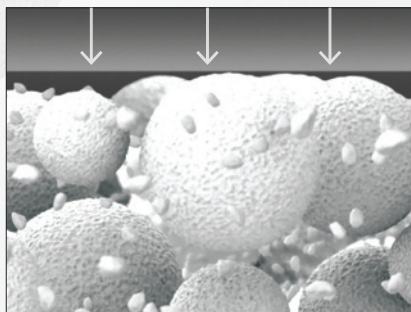

Jednoduchá manipulace

Pro efektivní adaptaci je snadná manipulace nezbytná. Díky specifickému uspořádání plniv SphereTec dochází k efektu kuličkového ložiska, což umožňuje excelentní adaptaci a tvarovatelnost. Struktura SphereTec je schopna vázat více volné pryskyřice, a tím zabraňuje lepidlosti materiálu na nástroje.


KULATÉ

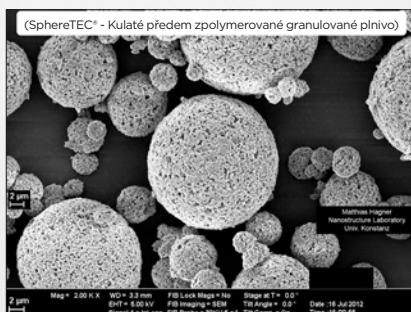

Estetika a jednoduchost

Přirozená estetika snadno. Plniva SphereTEC® mají unikátní strukturu, která umožňuje přesné a spolehlivé uzpůsobení odstínu pro vynikající chameleon efekt. Mikrostruktura plniv umožňuje dosáhnout vysokého lesku rychleji.

MIKROSKOPICKY KALIBROVANÉ

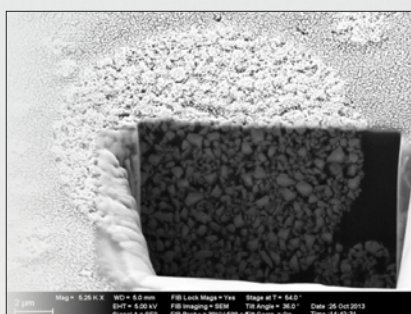

Dlouhotrvající spolehlivost

Dlouhodobě funkční výplně. Vyšší objem a hustota plniv zaručují pevnost a trvanlivost materiálu. Předpolymerizovaná pryskyřice zajišťuje výplně odolnější vůči zbarvení.

SUPERSTRUKTURY

Výplně s Neo Spectra™ ST

Pro vaše nejčastější případy.



Neo Spectra™ ST Univerzální výplňový materiál

Užijte si jednoduchou a snadnou manipulaci při použití viskozity dle vašeho výběru (5 univerzálních odstínů Cloud, které pokryjí celou řadu VITA®1 vzorníků).



Pro zjednodušení
ve frontě



Neo Spectra™ ST Univerzální výplňový materiál

Neo Spectra™ ST Effect
které skvěle doplňují z
společně s použitím 5



vždy jednoduše a spolehlivě.

ni složitých případů
álním úseku.



Spectra™ ST Effects výplňový materiál

cts disponuje 2 dalšími opacitami,
jednodušený systém vrstvení
universálních CLOUD odstínů.



Účinnost, všestrannost a vysoká estetika
díky tekuté konzistenci.



Neo Spectra™ ST flow Zatékavý výplňový materiál

Tekutost pod vaší kontrolou zaručí všestrannou
manipulaci. Výběr kompletních odstínů v rámci
NeoSpectra portfolia umožní přirozený vzhled výplně.



Výjimečná manipulace

Dvě dostupné viskozity

Kompozita Neo Spectra™ ST disponují buď krémovitou a roztíratelnou anebo pevnou konzistencí. Tímto uspokojí rozdílné preference na techniku aplikace materiálu.

- Snadno přilne ke stěnám kavity
- Nelepí se na ruční nástroje
- Snadno se modeluje a tvaruje
- Má výbornou odolnost vůči sesouvání se



74%

zubních lékařů není spokojeno s manipulačními vlastnostmi kompozit jako je adaptabilita a lepivost.²



Všestranná manipulace se zatékavým kompozitem

Použití zatékavého materiálu pro tradiční indikace v linii úsměvu Neo Spectra™ ST flow, umožňuje vysoce estetické a dlouhotrvající výplně.

- Tekutost pod vaší kontrolou
- Excelentní adaptace v kavitě
- Materiál zůstane na místě dokud tekutost neaktivujeme použitím nástroje



66%

zubních lékařů používá tradiční zatékavé materiály na výplně kavit V. třídy. Průměrně 1/4 výplní kavit V. třídy se nachází ve frontálním úseku.³

² Výplňové materiály Dentsply Sirona, evropský průzkum mezi uživateli kompozitů 2015, n=297.

³ Zatékavé kompozity Dentsply Sirona, uživatelská studie, srpen 2018.

Zjednodušená estetika


Univerzální odstíny CLOUD pro běžné případy

Základní částice plniva SphereTEC® a pryskyřice společně umožňují vynikající chameleon efekt usnadňující uzpůsobování odstínu. Jeden univerzální odstín CLOUD je vše, co ve většině případů potřebujete.

- 5 univerzálních odstínů CLOUD pokrývá celou řadu VITA®¹
- Spolehlivé a přesné uzpůsobení se přirozenému odstínu zubu
- BW odstín pro bělené zuby

88%

zubních lékařů skladuje více než pět odstínů VITA®^{1,4}

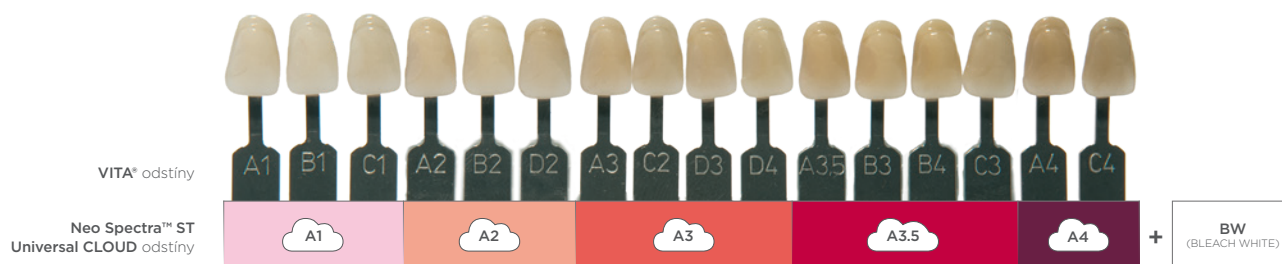

VITA® není registrovaná obchodní značka Dentsply Sirona.


Přidané dentinové a sklovinné odstíny pro složité případy ve frontálním úseku

U esteticky náročných frontálních případů fungují odstíny CLOUD Neo Spectra™ ST Effects a Neo Spectra™ ST universal společně v rámci zjednodušené techniky vrstvení.

- Pro dodání opacity zvolte jeden ze dvou dentinových odstínů Neo Spectra™ ST Effects
- Jeden sklovinný odstín pro získání translucence na incizi
- Jednoduchý postup a technika pro vysokou estetiku

Více než 1/3

zubních lékařů považuje barevné uzpůsobení za nejnáročnější aspekt zhotovování výplní kavit IV. třídy.⁵

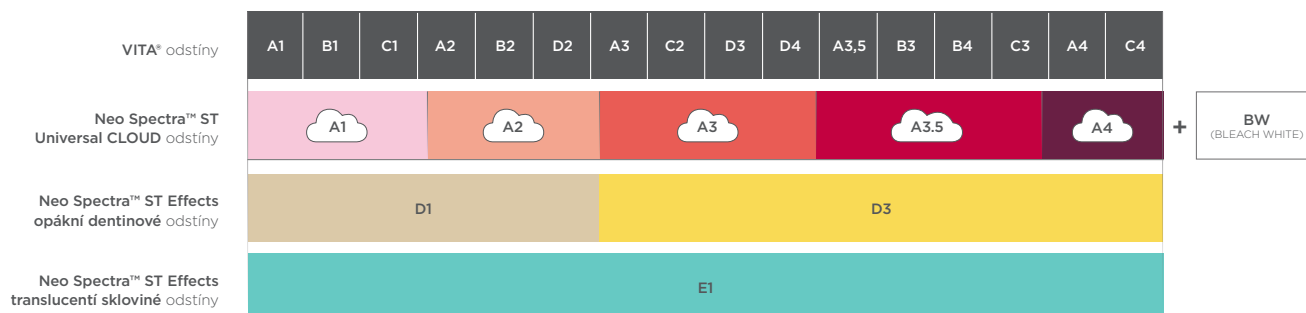

VITA® není registrovaná obchodní značka Dentsply Sirona.

⁴ Sdělení Aegis, průzkum přímých výplňových materiálů 2016 (n=107).

⁵ 2018, The Key Group, Inc.

Neo Spectra™ ST

Univerzální výplňový materiál

VYSOKÁ VISKOZITA

Neo Spectra ST úvodní balení - kompule (HV) 60701970

24x kompule HV (každá 0,25 g)
(obsahuje odstíny: 4 x A1; 4 x A2; 8 x A3; 4 x A3.5; 4 x A4)
1x pistole Compules® Tips Gun
1x nálepka se vzorníkem odstínů I-shade
1x Prime&Bond Universal™ (2,5 ml)
příslušenství

Neo Spectra ST úvodní balení - stříkačky (HV) 60701980

5x stříkačka HV (každá 3 g)
(obsahuje odstíny: A1; A2; A3; A3.5; A4)
1x nálepka se vzorníkem odstínů I-shade
1x Prime&Bond Universal™ (2,5 ml)
příslušenství

Neo Spectra ST ekonomické úvodní balení - stříkačky (HV) 60701990

6x stříkačka HV – (každá 3 g)
(obsahuje odstíny: 3 x A2; 3 x A3)
1x nálepka se vzorníkem odstínů I-shade
1x Prime&Bond Universal™ (2,5 ml)
příslušenství

Doplňující balení (HV)	Kompule	Stříkačky
Odstíny	(16 x 0,25 g)	(1 x 3 g)
A1 (= VITA® odstíny A1; B1; C1)	60701971	60701981
A2 (= VITA® odstíny A2; B2; D2)	60701972	60701982
A3 (= VITA® odstíny A3; C2; D3; D4)	60701973	60701983
A3.5 (= VITA® odstíny A3.5; B3; B4; C3)	60701975	60701985
A4 (= VITA® odstíny A4; C4)	60701974	60701984
BW (Bleach White)	60701976	

NÍZKÁ VISKOZITA

Neo Spectra ST úvodní balení - kompule (LV) 60701870

24x kompule LV (každá 0,25 g)
(obsahuje odstíny: 4 x A1; 4 x A2; 8 x A3; 4 x A3.5; 4 x A4)
1x pistole Compules® Tips Gun
1x nálepka se vzorníkem odstínů I-shade
1x Prime&Bond Universal™ (2,5 ml)
příslušenství

Neo Spectra ST úvodní balení - stříkačky (LV) 60701880

5x stříkačka LV (každá 3 g)
(obsahuje odstíny: A1; A2; A3; A3.5; A4)
1x nálepka se vzorníkem odstínů I-shade
1x Prime&Bond Universal™ (2,5 ml)
příslušenství

Neo Spectra ST ekonomické úvodní balení - stříkačky (LV) 60701890

6x stříkačka LV – (každá 3 g)
(obsahuje odstíny: 3 x A2; 3 x A3)
1x nálepka se vzorníkem odstínů I-shade
1x Prime&Bond Universal™ (2,5 ml)
příslušenství

Doplňující balení (LV)	Kompule	Stříkačky
Odstíny	(16 x 0,25 g)	(1 x 3 g)
A1 (= VITA® odstíny A1; B1; C1)	60701871	60701881
A2 (= VITA® odstíny A2; B2; D2)	60701872	60701882
A3 (= VITA® odstíny A3; C2; D3; D4)	60701873	60701883
A3.5 (= VITA® odstíny A3.5; B3; B4; C3)	60701875	60701885
A4 (= VITA® odstíny A4; C4)	60701874	60701884
BW (Bleach White)	60701876	

Neo Spectra™ ST Effects

Univerzální výplňový materiál

Neo Spectra ST Effects úvodní balení - kompule 60701940

24x kompule HV (každá 0,25 g)
(obsahuje odstíny: 12 x D1; 8 x D3; 4 x E1)
1x kreslený průvodce technikou
1x nálepka se vzorníkem odstínů I-shade

Neo Spectra ST Effects úvodní balení - stříkačky (HV) 60701950

3x stříkačka HV – (každá 3 g)
(obsahuje odstíny: 1 x D1; 1 x D3; 1 x E1)
1x kreslený průvodce technikou
1x nálepka se vzorníkem odstínů I-shade

Doplňující balení (HV)	Kompule	Stříkačky
Odstíny	(16 x 0,25 g)	(1 x 3 g)
D1 (použití s A1; A2)	60701942	60701952
D3 (použití s A3; A3.5; A4)	60701943	60701953
E1 (použití s A1; A2; A3; A3.5; A4)	60701941	60701951

Neo Spectra™ ST flow

Zatékavý výplňový materiál

Neo Spectra ST Flow úvodní balení - kompule 60701910

24x kompule HV (každá 0,25 g)
(obsahuje odstíny: 4 x A1; 4 x A2; 8 x A3; 4 x A3.5; 4 x A4)
1x pistole Compules® Tips Gun
1x nálepka se vzorníkem odstínů I-shade
1x Prime&Bond Universal™ (2,5 ml)
příslušenství

Neo Spectra ST Flow úvodní balení - stříkačky 60701920

5x stříkačka (každá 1,8 g)
(obsahuje odstíny: A1; A2; A3; A3.5; A4)
1x nálepka se vzorníkem odstínů I-shade
1x Prime&Bond Universal™ (2,5 ml)
50x hrot na stříkačky
příslušenství

Doplňující balení	Kompule	Stříkačky
Odstíny	(16 x 0,25 g)	(2 x 1,8 g + 25 hrotů na stříkačky)
A1 (= VITA® odstíny A1; B1; C1)	60701911	60701921
A2 (= VITA® odstíny A2; B2; D2)	60701912	60701922
A3 (= VITA® odstíny A3; C2; D3; D4)	60701913	60701923
A3.5 (= VITA® odstíny A3.5; B3; B4; C3)	60701915	60701925
A4 (= VITA® odstíny A4; C4)	60701914	60701924
BW (Bleach White)	60701916	60701926
D1 (Opaque Dentin)	60701918	60701928
D3 (Opaque Dentin)	60701919	60701929
E1 (Translucent Enamel)	60701917	60701927

Doplňující balení hrotů na stříkačky 60701932

50x hrot na stříkačky

Pistole Compules® Tips Gun 60665900

1x pistole Compules® Tips Gun

Vzorník odstínů Neo Spectra™ ST 60701869

1x zásobník pro vzorky odstínů
9x vzorek odstínu (A1, A2, A3, A3.5, A4, BW, D1, D3, E1)